

يُعرف هذا الدليل على طريقة إقران معالج (معالجات) الصوت Cochlear™ Nucleus 7 مع تطبيق Nucleus Smart على هاتف ذكي متوافق يعمل بنظام Android*، لتتمكن من استخدام التطبيق للتحكم في معالج (معالجات) الصوت ومراقبته.

ملاحظة

لاستخدام إصدار Android من التطبيق، يجب تثبيت أحدث برنامج ثابت على معالج الصوت. يُرجى مراجعة الأخصائي.

إقران معالجك (معالجاتك)

ملاحظات

- إذا كان لديك معالج (معالجات) صوت آخر مقترن من قبل، فعليك إلغاء إقرانه أولاً. راجع الصفحة 4 للحصول على تعليمات إلغاء الإقران.
- التداخل اللاسلكي: عند محاولة إقران معالج الصوت بالتطبيق أو توصيله به، فقد تلاحظ تداخلاً من بعض الأجهزة (مثل الميكروويف أو أجهزة التوجيه اللاسلكية أو ناقلات أصوات التلفاز). إذا حدث ذلك، فابتعد عن الجهاز وأعد المحاولة.

8 في النافذة المنبثقة السماح،
لتطبيق Nucleus Smart،
اضغط على سماح.

7 في النافذة المنبثقة الموقع،
اضغط على موافق.

6 يتم عرض شاشة إقران معالجك
(معالجاتك).
اضغط على متابعة

1 قم بتجهيز معالجك (معالجاتك)
للاستخدام.



2 قم بتنشغيل Bluetooth على هاتفك
الذكي الذي يعمل بنظام Android.

3 قم بتنشغيل تطبيق Nucleus
Smart.

4 اسحب شاشات الترحيب.

5 أنشئ حساب Cochlear
أو

سجل دخولك إذا كنت قد أنشأت
حساباً في وقت سابق.

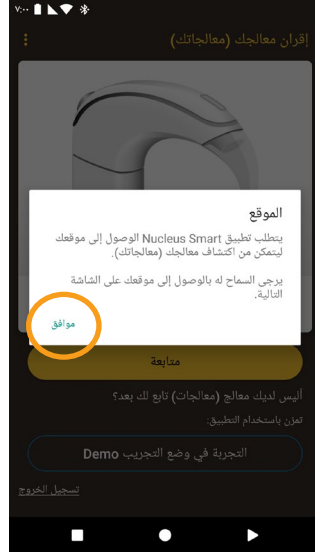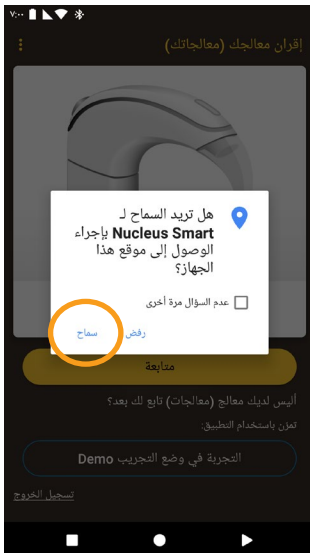


...يتبع في الصفحة التالية...

* للحصول على معلومات حول التوافق، يرجى زيارة www.cochlear.com/compatibility.

9 يتم عرض شاشة **اكتشاف معالجك (معالجاتك)**. أوقف تشغيل معالج (معالجات) الصوت، ثم أعد تشغيله. إذا كان لديك معالجان، فننّفذ هذا الإجراء على كليهما، الواحد تلو الآخر. اضغط على متابعة.




10 عندما يتم عرض المعالج (المعالجات)، اضغط مرة واحدة لبدء (المعالجات)، اضغط مرة واحدة لبدء الإقران.

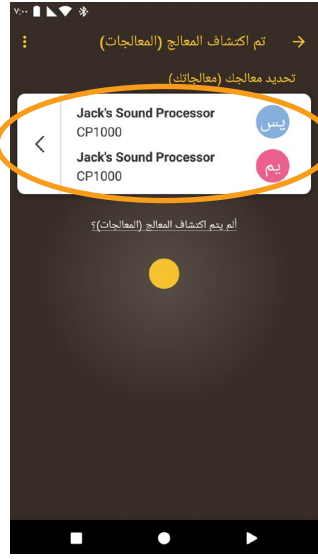

11 يتم عرض شاشة **المقترنة** عند اكتمال الإقران. اضغط على متابعة.



12 عندما يتم عرض شاشات **التحقق من المعالج**:
أ. قم بإزالة معالجك واضغط على زر المعالج.
ب. ضع المعالج على رأسك واضغط على متابعة.

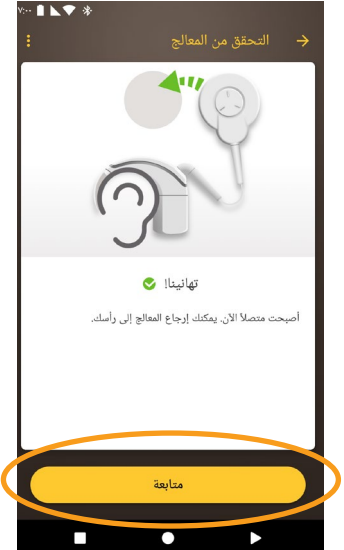

13 اضغط على خيار في شاشة **معالج (معالجات) الصوت** وأدخل التفاصيل المتعلقة بالمستخدم إذا طلب منك ذلك.



14 يتم عرض شاشة **تمكين مزامنة البيانات**. إذا كنت تريد استخدام هذه الميزة، فاضغط على تمكين.



15 إذا تم عرض شاشة **دقق الصوت**، فاطّلع على الخطوات الواردة في الصفحة التالية. أو إذا تم عرض شاشة **اكتمل الإعداد**، فاضغط على متابعة.



ملاحظة

لإقران مزيد من الأجهزة المتوافقة، عليك أولاً تعطيل Bluetooth على الأجهزة المقترنة.

الهواتف الذكية المزودة بدفق للسماعات الطبية

إذا كان هاتفك الذكي يدعم دفع الصوت للسماعات الطبية، فيمكنك تلقي الصوت من هاتفك مباشرة إلى معالجتك لإعداد دفع الصوت:

1 عندما تظهر شاشة **دفع الصوت**،

اضغط على **تمكين**.

سيتم إيقاف تشغيل معالج (معالجات) الصوت لبعض الوقت.



2 إذا كان معالج (معالجات) صوت آخر مقترن من قبل أو يقوم بدفع الصوت إلى هاتفك الذكي، فعليك نسيانه الآن.

اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لنسيان المعالج (المعالجات)، ثم اضغط على زر الرجوع للعودة إلى تطبيق Nucleus Smart.

3 انتظر ريثما يتم عرض شاشة **التوصيل بالمعالج**.




4 إذا كانت أصوات لمس المفاتيح ممكنة على هاتفك الذكي، فيتم عرض شاشة **أصوات لمس المفاتيح**.

اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لتعطيل أصوات لمس المفاتيح، ثم اضغط على زر الرجوع للعودة إلى تطبيق Nucleus Smart.



5 إذا تم عرض شاشة **اكتمل الإعداد!**، فاضغط على **متابعة**.

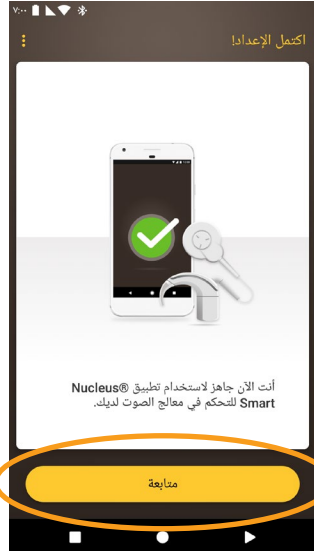

6 يمكنك استخدام تطبيق Nucleus Smart!

يمكنك مراجعة دليل مستخدم تطبيق Nucleus Smart للحصول على مزيد من التفاصيل.



ملاحظة: لإقران مزيد من الأجهزة المتوافقة، عليك أولاً تعطيل Bluetooth على الأجهزة المقترنة.

إلغاء إقران معالجك (معالجاتك)

إذا قمت بتغيير معالج (معالجات) الصوت، على سبيل المثال، إذا استلمت معالج صوت جديدًا من مركز الإصلاح، فسيتم عليك تنفيذ ما يلي:




- إلغاء إقران معالج (معالجات) الصوت القديم، ثم
 - إقران معالج (معالجات) الصوت الجديد.
- لإلغاء إقران المعالج (المعالجات):

1 افتح القائمة الخاصة بالتطبيق.

2 اضغط على الإعدادات.

3 اضغط على إعدادات المعالج.




4 اضغط على إلغاء إقران معالجك (معالجاتك).

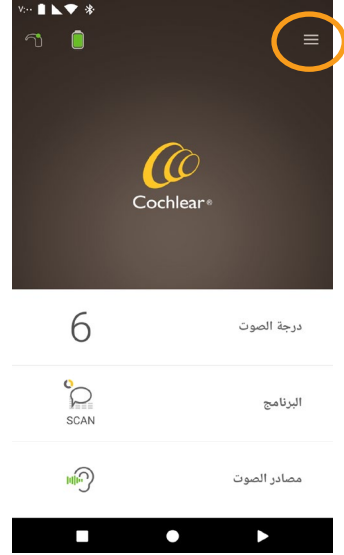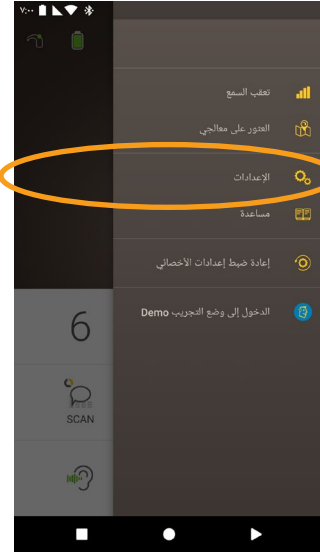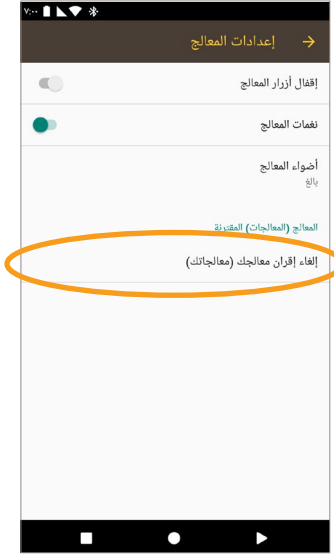

5 اضغط على نعم.

6 إذا كان الدفق ممكنًا على المعالج (المعالجات)، فستظهر مطالبة **بتعطيل الدفق**.



أ. اضغط على نعم واتبع المطالبات لنسيان معالجك (معالجاتك).
ب. اضغط على زر الرجوع للعودة إلى تطبيق Nucleus Smart.

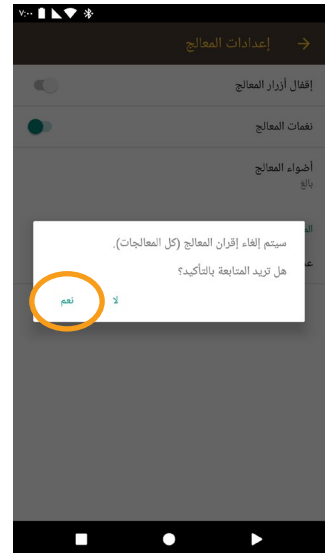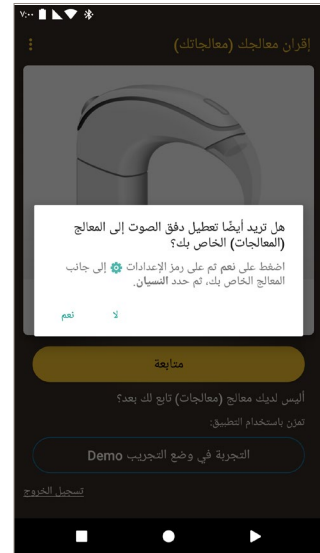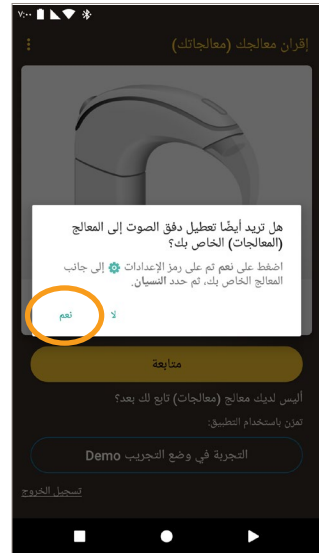

التحقق من حالة الدفق

للتحقق من حالة الدفق:

- 1 افتح القائمة الخاصة بالتطبيق.
- 2 اضغط على الإعدادات.
- 3 اضغط على دفق الصوت.
- 4 في حال كان الدفق غير نشط، اقرأ المعلومات على الشاشة للحصول على مزيد من التفاصيل واضغط على الروابط المتوفرة.

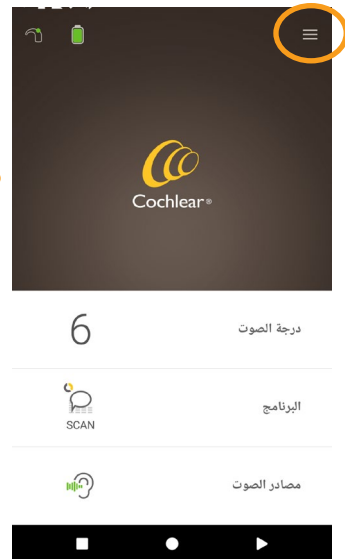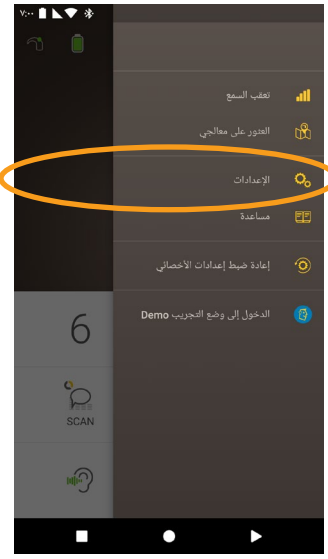

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia هاتف: +61 2 9428 6555
Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 11 542 7770
Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303 790 9010
Fax: +1 303 792 9025
www.cochlear.com

إن Cochlear وHear now. And always وNucleus والشعار البيضاوي
هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Cochlear Limited.
إن Android هي علامة تجارية لشركة Google Inc.

- للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق، راجع دليل مستخدم تطبيق Nucleus Smart.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول معالج الصوت، راجع دليل مستخدم معالج الصوت Nucleus 7.
- تفضل بزيارتنا على الإنترنت للحصول على نصائح ومشاهدة فيديوهات تعليمية والمزيد:

www.cochlear.com/