

Руководство по связыванию (для устройств на базе ОС Android™, P1285539, версия 1.0)

В данном руководстве представлены инструкции по связыванию звукового процессора Cochlear™ Nucleus 7 с приложением Nucleus Smart, установленном на совместимом смартфоне* на базе ОС Android, что является необходимым условием использования приложения для управления звуковым процессором.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования версии приложения для ОС Android необходимо, чтобы на звуковом процессоре была установлена последняя версия микропрограммного обеспечения. Для получения информации обратитесь к врачу-консультанту.

Связывание процессоров




ПРИМЕЧАНИЯ


- При наличии ранее связанных звуковых процессоров необходимо сначала отключить связывание с ними. См. инструкции по отключению связывания на стр. 4.
- Радиопомехи: при попытке подключения или связывания звукового процессора с приложением возможны помехи от некоторых приборов (например, микроволновых печей, беспроводных маршрутизаторов или ТВ-стримеров). Если это произошло, отойдите от подобных приборов и повторите попытку.

- 1 Подготовьте процессор к работе.
- 2 Включите функцию Bluetooth на смартфоне с ОС Android.
- 3 Запустите приложение Nucleus Smart.
- 4 Просмотрите экраны приветствия.
- 5 Создайте учетную запись Cochlear или выполните вход с уже существующими данными.


- 6 Отобразится экран Связывание процессора(-ов). Нажмите кнопку Продолжить.

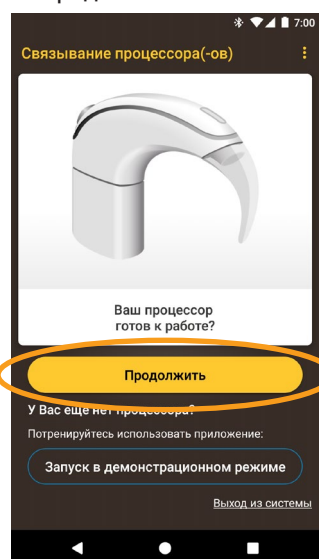

- 7 Во всплывающем окне Местоположение нажмите кнопку ОК.

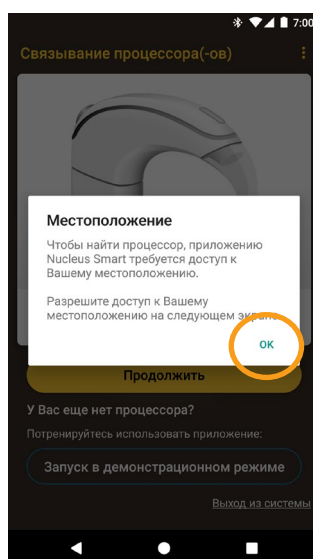


- 8 Во всплывающем окне с запросом доступа для приложения Nucleus Smart нажмите кнопку РАЗРЕШИТЬ.

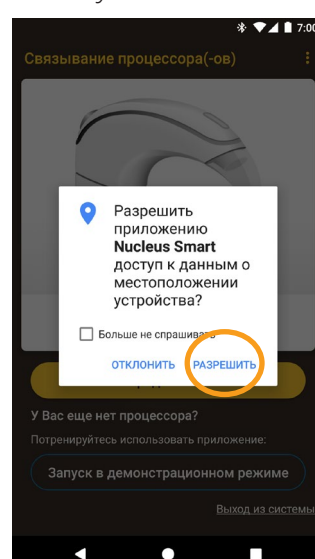


* Сведения о совместимости приведены на веб-странице www.cochlear.com/compatibility.

...ПРОДОЛЖЕНИЕ НА
СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ...

- 9 Отобразится экран **Обнаружение процессора(-ов)**. **Выключите**, а затем **включите** процессор. Если у вас два процессора, выключите и включите их один за другим. Нажмите кнопку **Продолжить**.

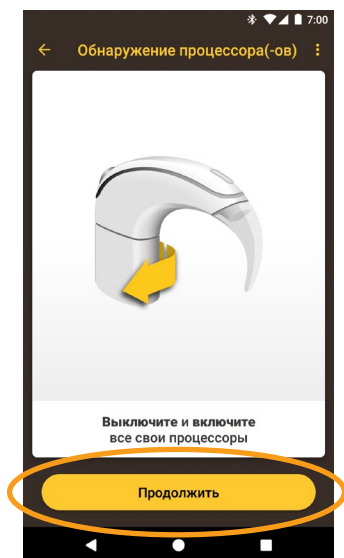

- 10 После того как процессор появится на экране, **коснитесь** его записи один раз, чтобы запустить связывание.

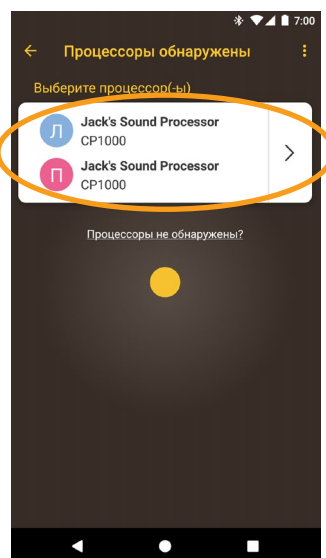


- 11 После завершения связывания отобразится экран **Связанные процессоры**. Нажмите кнопку **Продолжить**.




- 12 Когда отобразятся экраны **Подтвердить процессор**, выполните следующие действия:


- Снимите** процессор и **нажмите** кнопку процессора.
- Наденьте** процессор на голову и нажмите кнопку **Продолжить**.

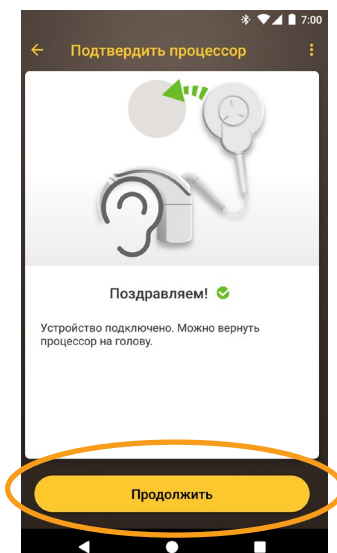


- 13 Выберите один из пунктов на экране **Звуковой процессор** и при появлении соответствующей подсказки введите данные пользователя.

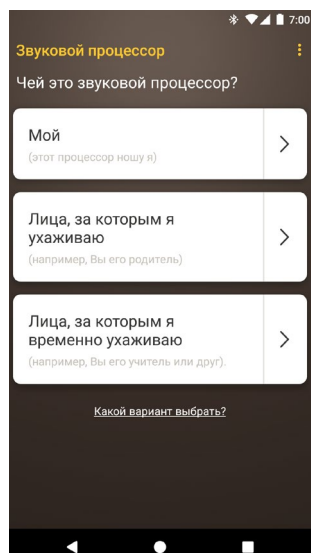

- 14 Отобразится экран **Включить синхронизацию данных**. При необходимости использовать эту функцию нажмите кнопку **Включить**.

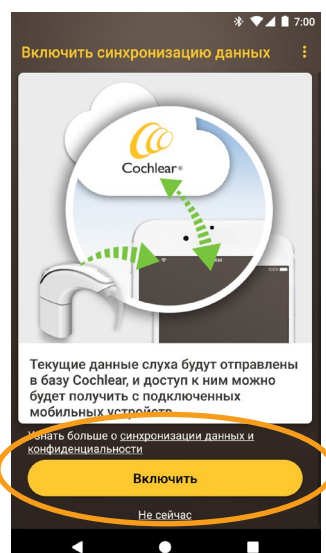

- 15 Если отобразится экран **Потоковая передача звука**, см. инструкции на следующей странице. **Либо**, если отобразится экран **Установка завершена**, нажмите кнопку **Продолжить**.

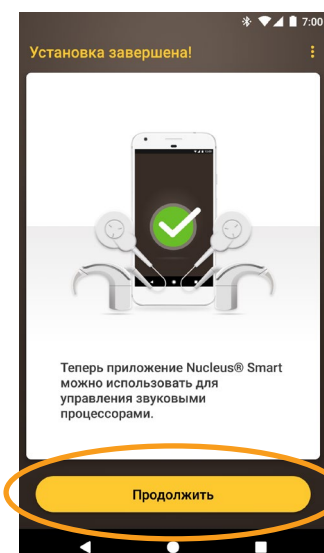

ПРИМЕЧАНИЕ


Чтобы связать дополнительные совместимые устройства, сначала необходимо отключить функцию Bluetooth на уже связанных устройствах.

Смартфоны, поддерживающие потоковую передачу звука на слуховые аппараты

Если ваш смартфон поддерживает потоковую передачу звука на слуховые аппараты, вы сможете принимать звук со смартфона напрямую на ваш процессор.

Чтобы настроить потоковую передачу звука, выполните следующие действия.


- 1 Когда отобразится экран **Потоковая передача звука**, нажмите кнопку **Включить**. При этом ваш звуковой процессор будет ненадолго выключен.

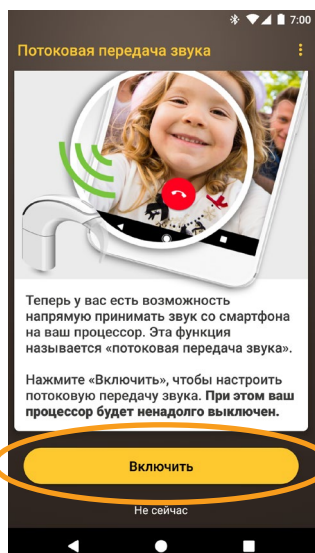

- 2 При наличии других связанных звуковых процессоров или процессоров, на которые выполняется потоковая передача звука с вашего смартфона, необходимо воспользоваться функцией **Забывать** для отключения их связи.


Чтобы воспользоваться функцией **Забывать**, следуйте подсказкам на экране, после чего нажмите кнопку **возврата**, чтобы вернуться в приложение Nucleus Smart.

- 3 Дождитесь завершения процедуры **Подключение к процессору**.

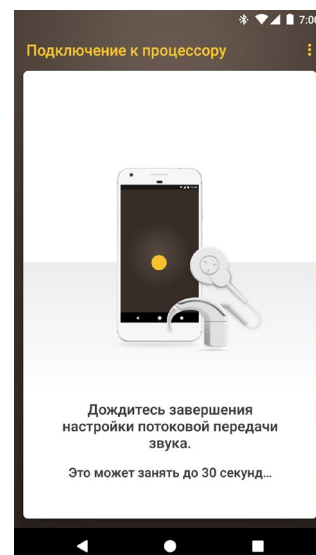


- 4 Если на вашем смартфоне включена функция воспроизведения **звуков при нажатии** кнопок, отобразится экран **Звуки при нажатии**.

Чтобы **отключить** функцию **звуков при нажатии**, следуйте подсказкам на экране, после чего нажмите кнопку **возврата**, чтобы вернуться в приложение Nucleus Smart.

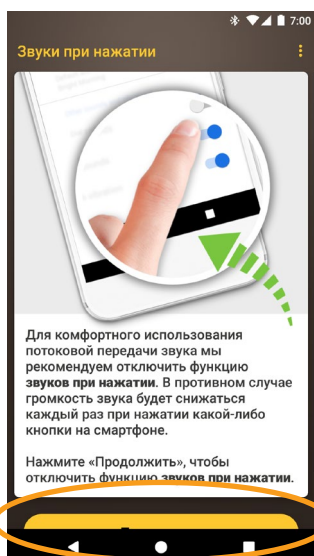

- 5 Когда отобразится экран **Установка завершена**, нажмите кнопку **Продолжить**.

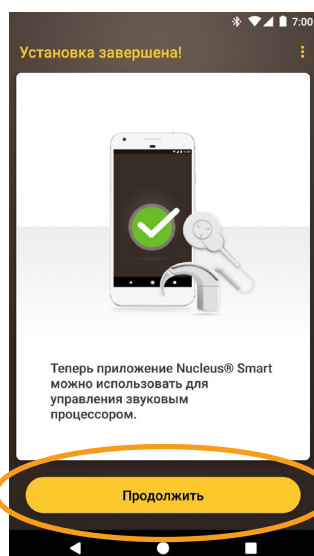

- 6 Теперь приложение **Nucleus Smart** можно использовать! Подробные сведения см. в *руководстве пользователя приложения Nucleus Smart*.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы связать дополнительные совместимые устройства, сначала необходимо отключить функцию Bluetooth на уже связанных устройствах.


Отключение связывания процессоров

При смене звукового процессора, например, после получения нового процессора из сервисного центра, следует выполнить следующие действия:


- **Отключите связывание** предыдущего звукового процессора.
- Затем выполните **связывание** нового звукового процессора.

Чтобы отключить связывание процессора, выполните следующие действия:


- 1 Откройте **меню** приложения.

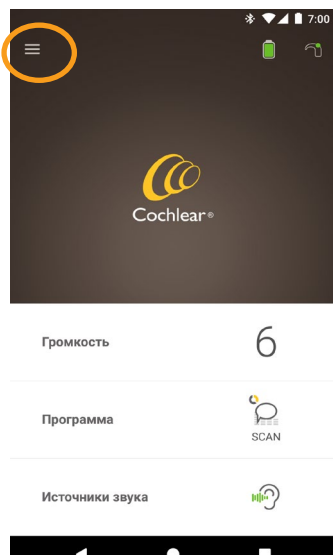


- 2 Выберите пункт **Настройки**.

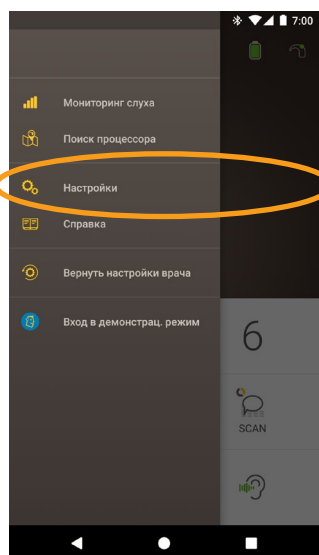


- 3 Выберите пункт **Параметры процессора**.

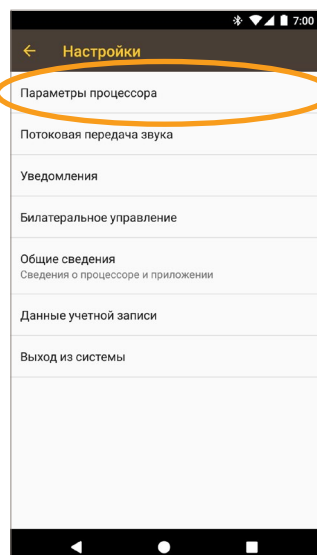


- 4 Выберите пункт **Отключение связывания процессора(-ов)**.

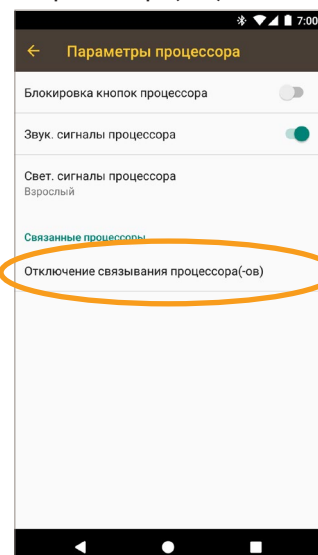


- 5 Нажмите кнопку **ДА**.

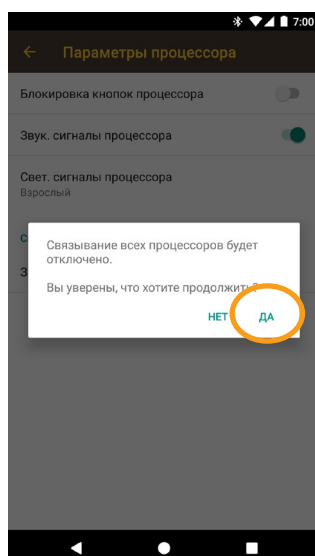

- 6 Если на ваш процессор выполняется потоковая передача звука, на экране появится подсказка о том, как **отключить потоковую передачу звука**.

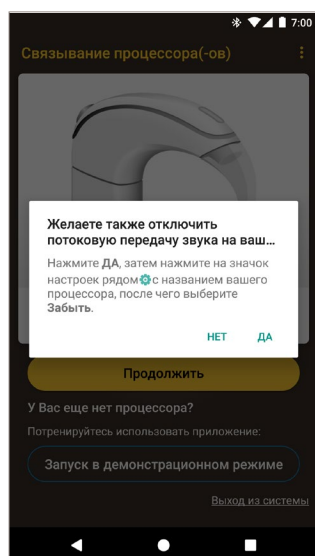


- A. Нажмите кнопку **ДА** и следуйте подсказкам, чтобы устройство «забыло» процессор.
B. Нажмите кнопку **возврата**, чтобы вернуться в приложение Nucleus Smart.

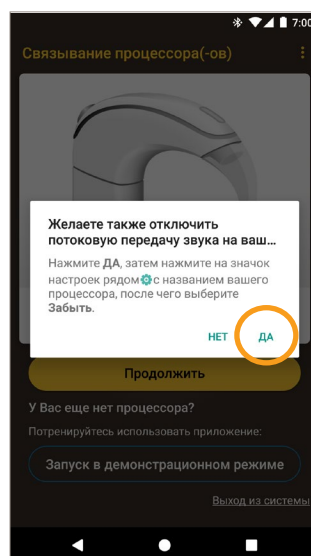


Проверка статуса потоковой передачи звука

Чтобы проверить статус потоковой передачи звука, выполните следующие действия:


- 1 Откройте **меню** приложения.

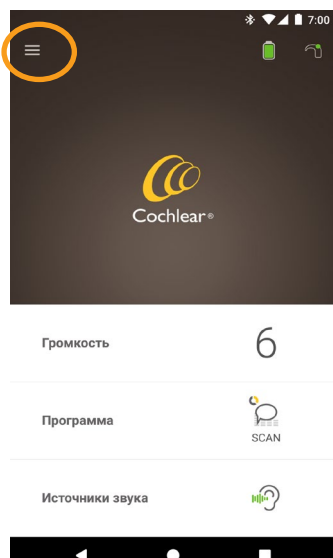

- 2 Выберите пункт **Настройки**.

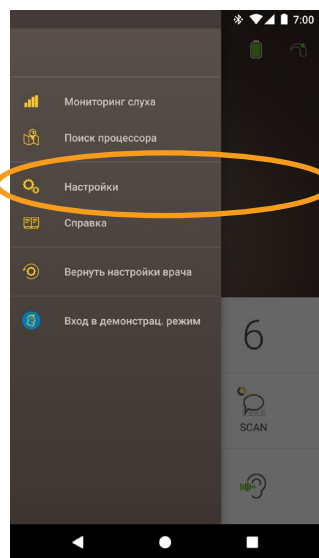

- 3 Выберите пункт **Потоковая передача звука**.

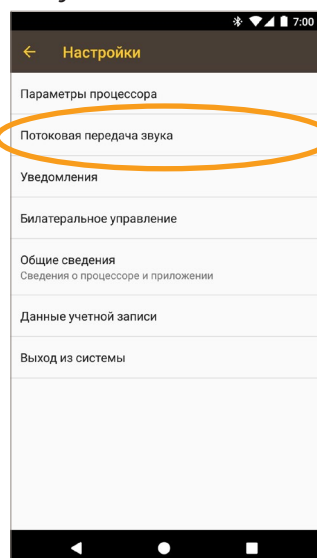

- 4 Если потоковая передача звука **не активна**, изучите информацию на экране и перейдите по доступным ссылкам.

- Подробные сведения о приложении см. в *руководстве пользователя приложения Nucleus Smart*.
- Подробные сведения о звуковом процессоре см. в *руководстве пользователя звукового процессора Nucleus 7*.
- Рекомендации, обучающие видео и прочие материалы можно найти на нашем веб-сайте: www.cochlear.com/

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555
Fax: +61 2 9428 6352
EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 11 542 7770
Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025
www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus и логотип в форме эллипса являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Cochlear Limited. Android является торговой маркой компании Google Inc.

© Cochlear Limited 2019

D1359361 ISS2
Russian translation of D1320965 ISS2 JUN19